




替天下儿女尽孝 让老人有尊严地生活

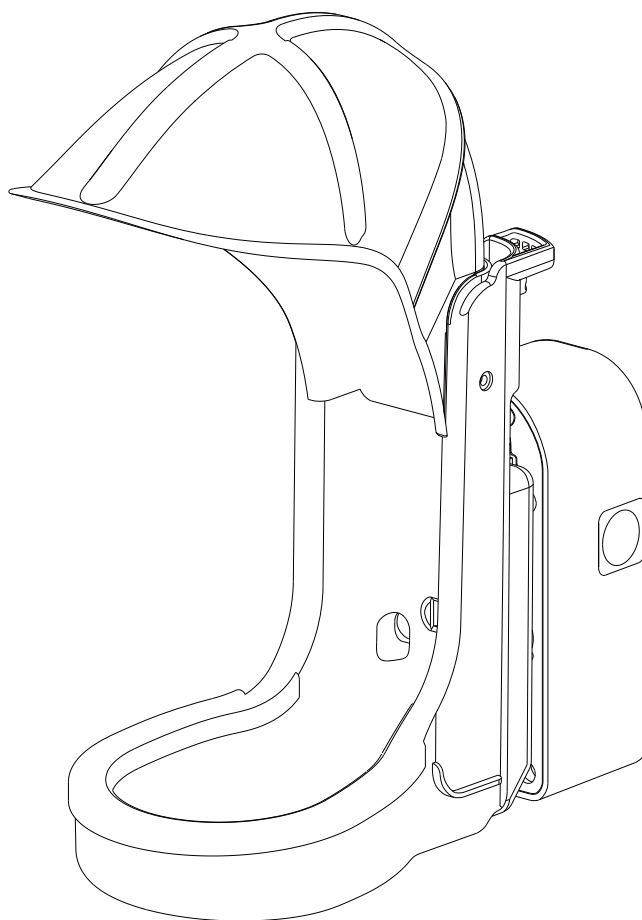

大小便智能护理机器人工作头使用说明书

全国统一服务热线：400-106-9616

一、产品清单



工作头




软管组件




包裤



纸尿裤

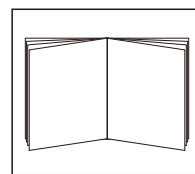

说明书

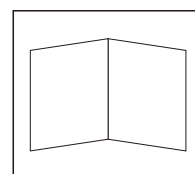

快速操作指南

二、装箱清单

软管组件x1PCS	保修卡 x1PCS
工作头x1PCS	合格证 x1PCS
包裤x1PCS	纸尿裤 x10PCS
二溴海因消毒片x1瓶	说明书 x1PCS
快速操作指南x1PCS	易损配件袋x1PCS

! 包裤穿戴前需要确认使用者皮肤不可有褥疮，发红，起泡，如有此状况须待使用者皮肤康复后再使用本产品。

三、纸尿裤、包裤与工作头安装



(图一)

1.将纸尿裤正面朝上，置于工作头外壳底座，纸尿裤大孔在下，上方小孔露出工作头螺丝，对准工作头，露出(图一)所示两个小孔。



(图二)

2.按(图二)所示将工作头主体略微倾斜放入工作头外壳底座上，将工作头主体底部向下按压到底。




(图三)

3.按（图三）所示将工作头主体与外壳后方卡扣顺时针拧紧。



(图四)

4.纸尿裤与工作头安装完成后效果。

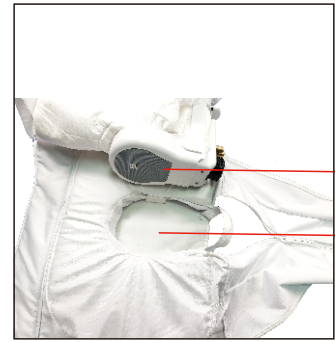

魔术贴

魔术贴

(图五)

5.按（图五）所示将安装完成后的工作头底部的魔术贴与包裤U型槽内魔术贴对齐粘贴。



(图六)

6.将包裤上的松紧带向上拉扣于工作头后方凹槽内。

四、软管组件与工作头正确连接方法

1.确认安装完成后将软管接头与工作头底部连接固定好，以听见“咔嗒”声为对接成功。



(图七)



(图八)

工作头与软管
连接成功后效果

五、工作头与人体穿戴(主机与工作头的配套使用, 详见相应的工作头说明书)


1.将准备好的工作头放置于使用者身体一侧, 将使用者背对自己方向侧身翻动90度, 翻动过程中, 对使用者轻翻, 以免对使用者造成伤害。



(图九)




(图十)

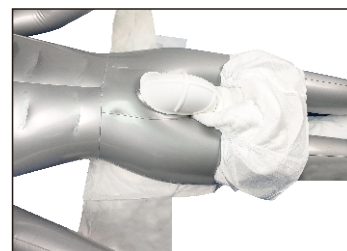

(图十一)


2.如(图九)、(图十)所示将工作头和包裤置于使用者臀部后面, 并将工作头、包裤居中和使用者臀部贴合, 将使用者回正。

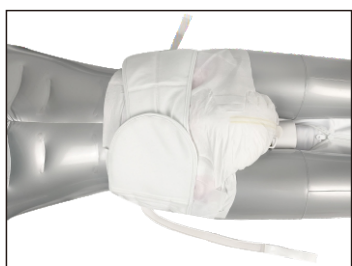

(图十二)



(图十三)

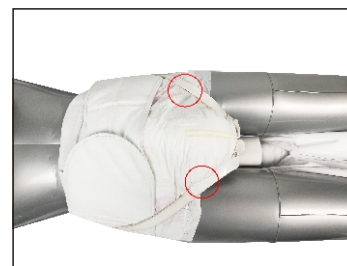

(图十四)

3.如图先将纸尿裤粘于使用者腰部, 后将包裤粘于纸尿裤之上。

4.包裤上的腰部魔术贴拉带穿过工作头上的两个孔并固定粘好, 根据使用者尺寸, 调整拉带长度。



(图十五)



(图十六)

工作头整体穿戴完成后效果

5.工作头穿戴完毕后, 需将大腿内侧的两边纸尿裤向外轻拉整理好, 使纸尿裤与皮肤紧密贴合, 不可有缝隙, 调整好工作头位置。


6.后将包裤上片与腰带粘合即可。完成后需将软管固定在床尾, 软管在床上从工作头到主机方向不可有明显爬坡, 方便软管内的水流入主机内的污水桶内。

六、工作头与人体的拆卸

1.依次打开包裤腰带处魔术贴，撕开工作头上的魔术贴拉带，最后如(图十九)所示，将使用者侧身90度，取下工作头。




(图十七)

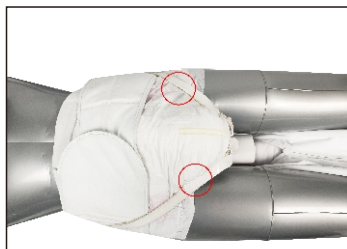

(图十八)



(图十九)

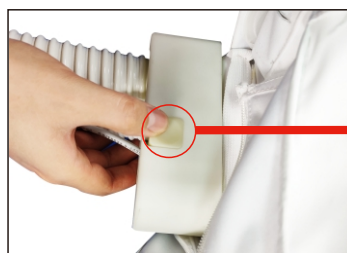

工作头与软管拆卸时应按住此按钮往外拔下即可

(图二十)

七、工作头清洗与维护

工作头清洗时可以直接喷洗不能浸泡；第一次用清水喷洗，配合牙刷之类小刷轻刷(图二十三)中所示几个地方；第二次使用已泡二溴海因消毒片的水冲洗工作头，最后擦拭干即可。



(图二十一)



(图二十二)



(图二十三)

公司名称:深圳作为科技有限公司

公司网址:www.zuowei.com

客服热线:400-106-9616

客服邮箱:info@zuowei.com

公司地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园



关注作为科技